

UMSTELLUNG AUF **THERAFOX PRO** UND WIE SIE VORGEHEN

Lieber CGM MEDISTAR-Anwender, Liebe CGM MEDISTAR-Anwenderin,

aufgrund der in absehbarer Zeit endenden Übergangsfrist zur Umsetzung für die neue Medizinprodukteverordnung (MDR) auf europäischer Ebene informieren wir Sie, dass wir uns dazu entschlossen haben, den Arzneimitteltherapiesicherheits-Check i:fox® durch das Medizinprodukt THERAFOX PRO zu ersetzen. Durch die Änderung wurde es notwendig, mit Ihnen einen neuen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) zu schließen. Diesen AVV haben Sie uns bereits zukommen lassen. Eine Umstellung auf den THERAFOX PRO kann somit nach der Installation dieses Quartalsupdates Q2/2021 durchgeführt werden. **Die privatärztlichen Praxen bitten wir, mit der Umstellung bis zum „Sonderupdate Mai 2021“ zu warten.** Allen kassenärztlich abrechnenden Praxen empfehlen wir, die Umstellung zeitnah durchzuführen. Sollten widererwartend technische Probleme beim Umstellen auftreten, hilft uns der zeitliche Vorlauf, diese rechtzeitig zu lösen.

Für einen leichten Einstieg setzen Sie sich bitte möglichst vor der Umstellung in CGM MEDISTAR mit dem neuen THERAFOX PRO auseinander. Dazu haben wir Ihnen ein Produkt-Tutorial erstellt, welches Sie hier anschauen können:

<https://www.ifap.de/amts-check-therafox>

Der Film ist auf der Seite unter „THERAFOX PRO Tutorial“ zu finden.

Zudem finden Sie im Handbuch weitere ausführliche Informationen:

<https://therafox.api.ifap.de/amts/handbuch>

Notwendiger Onlinezugang

Die bisherige Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung über den i:fox® erfolgte lokal auf Ihren Servern. Weil THERAFOX PRO aber als zentral gehostete Cloud-Lösung bereitgestellt wird, ist es erforderlich, dass an den Arbeitsplätzen, an denen die Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung erfolgen soll, ein Onlinezugang gegeben ist. Zur Unterstützung können Sie an den Arbeitsplätzen, an denen Sie eine Arzneimitteltherapiesicherheitsprüfung vornehmen möchten, in der CGM MEDISTAR-Befehlsebene das Kommando **THERAIP** eingeben. Im Falle eines positiven Ergebnisses erhalten Sie diesen Hinweis:



Systemvoraussetzungen:


- Computer oder Tablet mit Internetbrowser (Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox) bzw. eingebettet in eine andere Software-Anwendung
- Internetverbindung mit einer Übertragungsrate von mind. 250 kbit/s
- Mindestbreite von 1024 Pixel

Umstellung von i:fox® auf THERAFOX PRO


Sie können die Umstellung auf THERAFOX PRO zu jeder Zeit **an einem beliebigen Task durchführen**. Erst nach dem **Neustart** Ihrer Tasks* wird der THERAFOX PRO aktiv.

Vorgehensweise für Anwender mit BSNR:

Geben Sie in der CGM MEDISTAR-Befehlsebene bitte **PSH** ein. Als System-Kommando tragen Sie bitte **swrp therafox -on** ein und bestätigen Ihre Eingabe bitte mit **[OK]**.

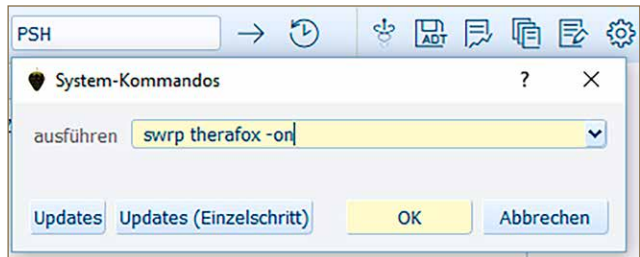

Bestätigen Sie den nachfolgenden Hinweis bitte ebenfalls mit **[OK]**.

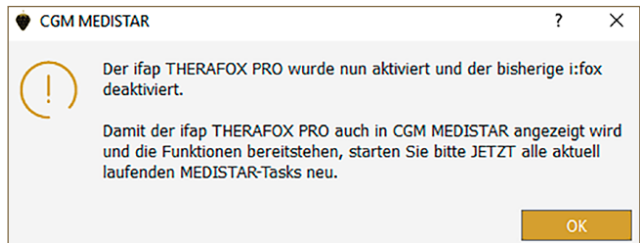

Starten Sie nun alle laufenden Tasks neu.*

Ist THERAFOX PRO aktiv und zur Arzneimitteltherapie-sicherheitsprüfung bereit, erkennen Sie das an diesem Icon im Rezept, BMP sowie im ifap praxisCENTER.



Vorgehensweise für Anwender ohne BSNR:

Praxen ohne BSNR bitten wir, mit der Umstellung auf den THERAFOX PRO bis zur Bereitstellung des „Sonderupdates Mai 2021“ zu warten. Nach der Installation des- selben wird es zur Umstellung auf den THERAFOX PRO zunächst erforderlich, dass Sie im ipC3 Ihre SAP-ID als Legitimation eintragen.

Wechseln Sie dazu in das ipC3. Unter Extras – Optionen im Reiter „Praxis/Patienteninformationen“ tragen Sie bitte im Bereich Vertrags-ID Ihre SAP- ID ein. Klicken Sie anschließend auf **[Übernehmen]** und beenden Sie den Dialog mit **[OK]**. **Bitte nehmen Sie die Eingabe an jedem PC vor, an dem der THERAFOX PRO mit dem AMTS-Check zum Einsatz kommen soll.**

Rufen Sie nun bitte an einem beliebigen PC den Dialog „Einstellungen Arzneimitteldatenbank“ über das Kommando **PSP** in CGM MEDISTAR auf. Setzen Sie bei „Privatpraxis“ das Häkchen und speichern Sie Ihre Eingabe bitte über **[Speichern]**. Sie werden gebeten, CGM MEDISTAR neu zu starten. **Ignorieren** Sie diesen Hinweis bitte zunächst und führen Sie vor dem Neustart Ihrer laufenden CGM MEDISTAR-Tasks noch das nachstehende Kommando aus. Über das Kommando **PSH** und der Eingabe des Systemkommandos **swrp therafox -on** aktivieren Sie den THERAFOX PRO. Führen Sie **jetzt bitte einen Neustart aller laufenden CGM MEDISTAR-Tasks** durch. Erst nach dem Neustart Ihrer Tasks wird der THERAFOX PRO aktiv.

***Hinweis:** Sollte nach dem Neustart Ihrer aktiven Tasks weiterhin das alte i:fox Icon aktiv sein, starten Sie bitte die jeweiligen Arbeitsplätze neu.

Alle möglichen Funktionszustände von THERAFOX PRO lesen Sie bitte in der ifap praxisCENTER Hilfe unter Arzneimitteltherapiesicherheits-Check im Bereich THERAFOX PRO nach.

Bei Fragen zur Umstellung auf den THERAFOX PRO steht Ihnen Ihr Vertriebs- und Servicepartner gerne zur Verfügung. **Fragen zum THERAFOX PRO** stellen Sie bitte direkt an ifap. Gehen Sie dazu auf www.ifap.de . Über den Reiter „AMTS“ gelangen Sie weiter unten auf der Seite in den Bereich „Support oder Problem melden“. Dort können Sie über das Kontaktformular Ihre Fragen zum Produkt stellen.

Herzliche Grüße

Ihr MEDISTAR Team

